





Massage Gun Mini

vezeték nélküli masszírozó

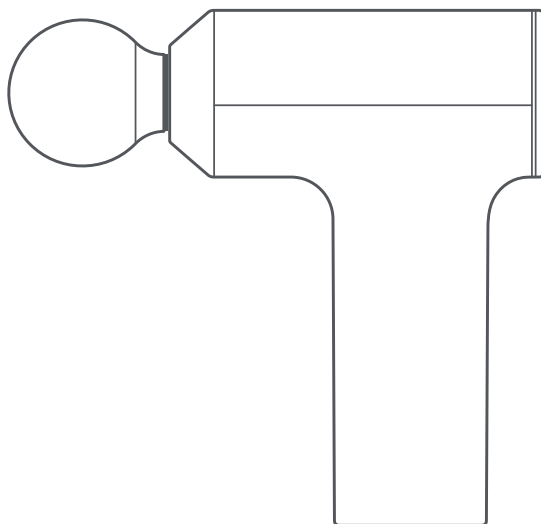

Felhasználói kézikönyv

A csomag tartalma

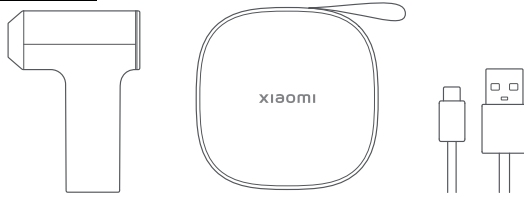


Massage Gun Mini

Tartótok

Töltőkábel




Kerek fej

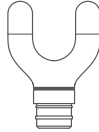

Duál fej




Lapos fej

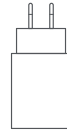

Adapter

Áttekintés

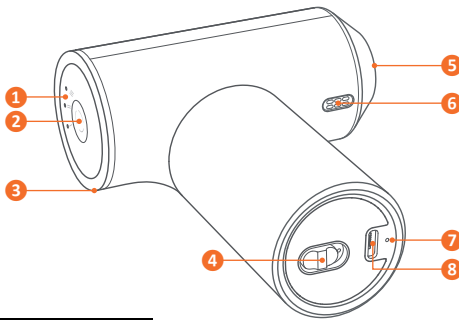

1. Sebességjelző
2. Sebesség állító gomb
3. Nyomásérzékelő jelző
4. Bekapcsológomb
5. Masszírozó fej csatlakozó
6. Levegő kimenet
7. Töltöttség/töltésjelző
8. Töltőcsatlakozó


Használat

A masszírozófej felszerelése és eltávolítása

Használja a megfelelő masszírozófejet a kívánt masszázstípushoz!

Szerelés előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, és ne próbálja meg működés közben a cserét!

Felszerelésekor a masszírozófej talpát erővel nyomja be a készülék orrába, ügyelve arra, hogy a fejen lévő vonal egy szintben legyen a torkolattal!

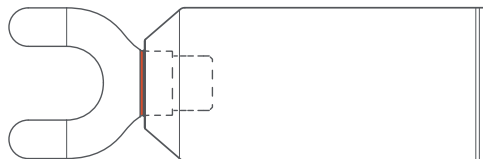

Indítás előtt győződjön meg arról, hogy a masszírozófej stabilan van a helyén!

Szét szereléskor fogja meg a masszírozófejet, és forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba, miközben kifelé húzza a torkolatból!

Töltés


Kapcsolja ki a készüléket, majd csatlakoztassa a töltőkábelt és az adaptert! Töltés

közben nem lehet bekapcsolni.

Ha bekapcsolt állapotban kezdik tölteni, a készülék automatikusan kikapcsol, és megkezdődik a töltés.

Be- és kikapcsolás, sebesség változtatása

Bekapcsoláshoz tolja a bekapcsológombot az „I” jelzéshez! Mindhárom sebességmérő felvillan, majd az első sebességjelző égve marad. A masszírozó a sebesség állító gomb megnyomásával indul el, 1-es sebességgel.

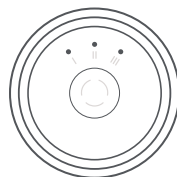

A masszírozás 15 perc folyamatos üzem után leáll és a készülék automatikusan készenléti módba lép. Az újraindításhoz nyomja meg a sebesség állító gombot!

A készülék automatikusan kikapcsol, ha 10 percig nem végez semmilyen műveletet. Az újraindításához kapcsolja ki, majd újra be a készüléket a bekapcsológombbal!

Kikapcsoláshoz tolja a bekapcsológombot az „O” jelzéshez! Az aktuális sebességjelző kialszik, és a készülék kikapcsol.

A sebesség megváltoztatásához nyomja meg a sebesség állító gombot! Három különböző sebesség közül lehet választani.

Szüneteltetéshez nyomja meg kétszer a sebesség állító gombot! A folytatáshoz nyomja meg ismételten! A készülék automatikusan kikapcsol, ha a szüneteltetés 10 percnél tovább tart. Az újraindításához kapcsolja ki, majd újra be a készüléket a bekapcsológombbal!

Újraindítás blokkolás után

Ha masszírozáskor túl erősen nyomja a készüléket, a beépített védelem megállítja a működést. Nyomja meg a sebesség állító gombot, hogy az alapértelmezés szerinti 1-es sebességgel újrainduljon!



Állapotjelzők

Sebességjelző

A sebességjelzők a kiválasztásnak megfelelően féhéren világítanak.

Nyomásérzékelő jelző

- **Nem világít** - enyhe nyomás
- **Világító fehér** - normál nyomás
- **Világító narancs** - túlzott nyomás
- **Villogó piros** - túlmelegedés elleni védelem

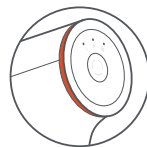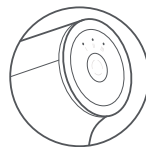

Töltöttség/töltésjelző

- **Pulzáló piros** - <20% töltöttség
- **Pulzáló fehér** - töltés folyamatban
- **Nem világít** - töltés befejezve



Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, húzza ki a kábelt! Ha a készüléket feltöltött akkumulátorral kezdi tölteni, a töltésjelző 20 másodperces pulzálás után kialszik.

Üzemeltetés

Helyezze fel a megfelelő masszírozófejet, kapcsolja be a készüléket, majd válassza ki a kívánt sebességet a személyes tapasztalatok szerint! Legelső alkalommal mindig a legalacsonyabb sebességgel indítson!

Enyhén nyomja a masszírozófejet az izomhoz, és lassan mozgassa előre-hátra! Ha van egy különösen fájó terület, gyakoroljon nagyobb nyomást rá, és tartsa ott 15-30 másodpercig! A készülék saját tolóerővel rendelkezik, ezért nem szükséges túlzott erőt alkalmazni a

nyomás kifejtésekor! Vigyázzon, hogy ne sértse meg az izmokat, csontokat! Használata a megfelelő izomfedettségű területeken javasolt, és ne masszírozzon ugyanazon a helyen 60 másodpercnél tovább! Az ajánlott használati idő 10 perc. Ha a fájdalom továbbra is érezhető, a masszázs időtartama hosszabbítható, de az egyszeri használat javasolt időtartama nem haladhatja meg a 15 percet, a folyamatos használat pedig a 30 percet!

Tisztítás és karbantartás

Tisztítás és karbantartás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból! Egy tiszta, enyhén nedves, puha ruhával, vagy nedves törlőkendővel tisztítsa meg, majd törölje szárazra!
Soha ne öblítse le vízzel!
Ne tegye ki a masszírozófejeket közvetlen napfénynek!
Ne használjon vegyszert a tisztításához, mert a készülék károsodhat, megrepedhet, vagy megváltoztathatja a színét!
Tárolja a készüléket hűvös, száraz helyen!
Ne tárolja a készüléket 40 °C feletti vagy -10 °C alatti hőmérsékleten!
Tartsa távol nedvességtől, tűztől, illetve korrozív környezettől! Ezek befolyásolják az akkumulátor teljesítményét.
A tároláshoz, illetve utazáshoz használja a mellékelt tartótokot!
Ne üsse oda, szorítsa meg túlzottan, ejtse le, vagy karcolja meg a készüléket!
Szállítható autóban, vonaton, hajón és repülőgépen.
Használat előtt mindig töltsse fel teljesen, ha hosszabb ideig nem használta!
Ha túlmelegszik, vagy deformálódik, megduzzad, vagy az akkumulátor szivárog a tárolás során, azonnal hagyja abba a használatot, és forduljon a szakszervizhez!

Hibaelhárítás

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
A töltésjelző nem világít töltés közben.	A hálózati adapter nincs megfelelően csatlakoztatva.	Ellenőrizze a csatlakozásokat!
Az akkumulátor lassan töltődik.	Az akkumulátor hőmérséklete túl magas vagy túl alacsony.	Várja meg, amíg az akkumulátor hőmérsékletű lesz!
A készülék nem indul.	Az akkumulátor lemerült.	Töltsse fel az akkumulátort!
	Túlzott nyomás miatt blokkol.	Indítsa újra a készüléket!
Szokatlan zaj hallható.	Idegen tárgy került a motorba.	Forduljon a márkaszervizhez!
	Motorhiba történt.	Forduljon a márkaszervizhez!
A készülék hőmérséklete túl magas.	Túl hosszú folyamatos üzemidő.	Várja meg, amíg a készülék lehűl! Használja az utasításoknak megfelelően!

Műszaki paraméterek

- Üzemidő max. 13 óra
- Akár 35 nap készenlét napi 10 perc üzemidő mellett
- 2600 mAh akkumulátor kapacitás
- 1600/2000/2500 fordulat/perc
- 40 dB(A) zajszint
- Töltés: USB Type-C DC 9 V/1,5 A, 5 V/2 A
- Méretek: 101×45×139 mm
- Súly: 380 g

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A Xiaomi termékek hivatalos forgalmazója
Expert Zrt.
1044 Budapest, Óradna u. 12.