



# DENVER

***Difrnce CTG-100***

*infravörös test és felület hőmérő*



**FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV**

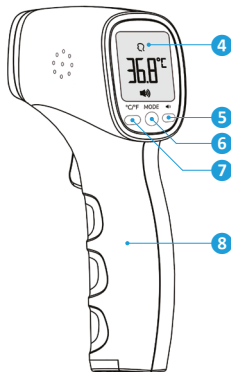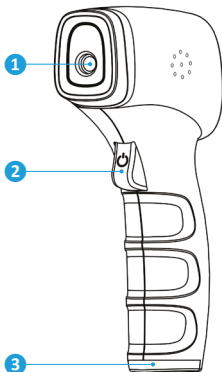

1. IR szenzor
2. Bekapcsolás/mérésindítás
3. Elem/akkumulátor fedél
4. Kijelző

5. Hang KI/BE gomb (JOBB)
6. MODE gomb
7. °C/°F gomb (BAL)
8. Markolat

## **Bekapcsolás**

Nyissa ki az elemtartót, és helyezzen be 2 db AA méretű elemet! A kezdéshez nyomja meg a bekapcsológombot!

## **Hőmérséklet mérése**

A hőmérséklet beolvasásához egyszerűen nyomja meg a mérésindító gombot!

## **Üzemmódváltás**

Nyomja meg az MODE gombot az átváltáshoz a testhőmérs és felület hőmérs funkciók között!

## **Memória**

A hőmérő minden mérés alkalmával automatikusan elmenti a mért értéket. A legutóbbi 32 érték olvasható vissza.

## **Korábban mért értékek kiolvasása (F-1)**

Kapcsolja be a hőmérőt! Tartsa nyomva 3 mp-ig a MODE gombot, és megjelenik az „F-1” felirat! Az elmentett értékek megjelenítéséhez nyomja meg a BAL, vagy JOBB gombot!

## **Riasztási küszöb beállítása (F-2)**

F-1 üzemmódban nyomja meg még egyszer a MODE gombot! Megjelenik az „F-2” felirat. Nyomja meg a BAL, vagy JOBB gombot és megjelenik a beállított riasztási küszöb! A küszöb 0,1 értékkel változik minden alkalommal, amikor újra megnyomja a BAL, vagy JOBB gombot. Az alapértelmezett riasztási küszöbérték 37,5 °C, a küszöbtartomány 35–42 °C. Amennyiben a mért hőmérséklet magasabb a beállított küszöbnél, az LCD kijelző vörösen világít.

## **Kijelzések**

HI - Felület hőmérséklet módban 100 °C-nál, test hőmérséklet módban 42,2 °C-nál nagyobb érték  
Lo - Felület hőmérséklet módban 0 °C-nál, test hőmérséklet módban 34,9 °C-nál kisebb érték

## **Alapállapot visszaállítása**

- Kapcsolja be a készüléket! Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre 3 mp-ig a MODE és a JOBB gombokat!
- Megjelenik a „dEL” felirat a kijelzőn. Ezután nyomja meg a mérésindítás gombot!
- Megjelenik az „End” felirat a kijelzőn. Minden adat törlődött.

### **Figyelmeztetések és óvintézkedések**

12 év alatti gyermekek elől elzárva tartandó!

Soha ne használja a hőmérőt a rendeltetésétől eltérő célokra! Tartsa be az általános biztonsági előírásokat, ha gyermekeken alkalmazza!

A készülék nem vízálló, soha ne merítse a hőmérőt vízbe, vagy más folyadékba! Tisztításhoz, fertőtlenítéshez használjon minimum 75%-os alkoholt és puha törlőkendőt! A hőmérőt ne tárolja -25 °C alatt, vagy 55 °C felett, vagy túlzott páratartalomban (max. 95%).

Ha a hőmérőt mérés előtt hagyja 10 percig a szobahőmérséklethez igazodni!

Ne használja a hőmérőt, ha sérülés jeleit tapasztalja rajta! Ne próbálja megjavítani a sérült készüléket!

Ügyeljen a szkennelőlencse épségére!

Figyeljen, hogy a készüléket ne ejtse le, ne dobálja, óvja erős ütésektől!

A hőmérő csak háztartási használatra szolgál!

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A Denver termékek hivatalos forgalmazója  
az Expert Zrt.

1044 Budapest, Óradna u. 12.