

# JOVS

Acneaway fényterápiás akne- és pattanáskezelő készülék

Felhasználói kézikönyv

## Használat előtt

- Ne használja, ha 16 év alatti, vagy ha fizikailag vagy mentálisan nem alkalmas rá!
- Ne használja, ha arcallergiája, aktív gyulladása vagy érzékeny bőre van!
- Ne használja, ha idegrendszeri betegségben szenved!
- Ne használja, ha közepes vagy súlyos szívbetegségben szenved!
- Ne használja, közepes vagy súlyos magas vérnyomásban, rosszindulatú daganatokban, cukorbetegségben, szőrtüszőgyulladásban, fertőző bőrbetegségekben, égési sérülésekben vagy véralvadási rendellenességekben szenved!
- Ne használja, ha rendellenes kollagén-anyagcserével, hegesedéssel, sebhelyekkel vagy rossz sebgyógyulással rendelkezik!
- Ne használja, ha érrendszeri betegségben, például visszérben szenved a besugárzott területen!
- Bármely vérzéses betegségben, rendellenes sebgyógyulásban vagy immunológiai betegségben szenvedő beteg!
- Ne használja, ha a kezelt területen herpes simplex, vitiligo, pikkelysömör, chloasma vagy egyéb bőrelváltozások, vérömlenyek stb. vannak!
- Ne használja, ha olyan betegsége van, amely gátolja az immunválaszt (beleértve a HIV-fertőzést, a lupus erythematosust, a porfirriát stb.)!
- Ne használja, ha az elmúlt héten bőrfehéritő termékeket használt, vagy ha A vitamin tartalmú kozmetikumokat használt!
- Győződjön meg arról, hogy bőre tiszta és száraz, és nincs rajta krém, testápoló, kenőanyag stb. maradvány!
- Ne használja immunszuppresszánsok, aszpirin, izotretinoin stb. szedése közben!
- Fényérzékeny személyek, valamint azok, akik a közelmúltban fényérzékeny gyógyszereket (pl. tetraciklin stb.) használtak, használata tilos! Ha korábban fényérzékenységi problémái voltak, használat előtt kérje ki orvosa tanácsát!
- Ha bőre napfénynek volt kitéve vagy fény által károsodott (napégés), várja meg, amíg a bőre meggyógyul, mielőtt használná!
- Ne használja a szemhéjak vagy a szemgolyók környékén, illetve, ha a szem körüli bőr érzékeny! A szemgolyók károsodásának elkerülése érdekében saját helyzetének megfelelően állítsa be a fényerőt!
- A termék használata után legalább 48 órán át használjon fizikai fényvédelmet!

## Ne használja a test következő területein

- Sebek, aktív vérzéssel járó területek
- Szájüreg, szeméremtest, nyálkahártyák stb.
- Műtéti és plasztikai beavatkozások helyszínei
- Szemöldök, haj és egyéb szőrnövekedési területek
- Artériák és vékony bőrrű területek
- Tetoválások, testfestés, hegek Gyulladásos és allergiás területek
- A gége
- Nagy elváltozások
- Fül
- Szemgolyók, szemhéjak
- Anyajegyek
- Mellbimbók, bimbóudvarok
- Köldök

## Biztonsági utasítások

A készülék biztonságos használata érdekében figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és a készüléket a rendeltetésének megfelelően használja!



### Veszély!

Olyan tartalmat jelöl, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat.



### Figyelem!

Olyan tartalmat jelöl, amely súlyos sérülést okozhat.



### Vigyázat!

Olyan tartalmat jelöl, amely sérülést vagy anyagi kárt okozhat.



### Veszély!

- Azok a felhasználók, akiknek elektronikus implantátumuk van, például pacemaker vagy mesterséges szív-tüdő gép, ne használják a készüléket, mivel balesethez vagy fizikai kellemetlenséghez vezethet!
- Azok a személyek (beleértve a gyermekeket is), akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, például a testi vagy szellemi fogyatékkal élők, csak felügyelet mellett használhatják, tisztíthatják és karbantarthatják a készüléket!
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében kerülje a készülék használatát vízzel teli berendezések (pl. kád, mosdó) közelében! A készüléket és az áramforrást mindig tartsa szárazon!
- A baleset és a készülék meghibásodásának elkerülése érdekében ne tegye közvetlen hőforrás (pl. fűtőtest, légkondicionáló) közelébe!
- Tartsa távol a készüléket a korrozív környezettől, hogy elkerülje a balesetet vagy a készülék meghibásodását!
- Baleset elkerülése érdekében tartsa elzárva csecsemő és kisgyermek elől!



- A baleset elkerülése érdekében kerülje a készülék belsejében található fényforrás közvetlen sugárzásának kitettségét!
- Ne használja a készüléket, ha az akkumulátor megsérült, az áramütéses balesetek elkerülése érdekében! A készülék nem vízálló, ezért ne merítse vízbe, a meghibásodás vagy baleset elkerülése érdekében! Ha vízzel érintkezik, azonnal hagyja abba a használatot!
- Ha a kezelendő bőrfelület nem tiszta, az befolyásolja a hatást, és előfordulhat, hogy a készülék nem indítja el a fénykibocsátást, vagy szakaszosan működik.
- Tartsa a fényforrást a bőr közelében, hogy elkerülje a bőr károsodását vagy az égési sérülést!
- Ne kezelje ugyanazt a területet egymás után több, mint 6 alkalommal, mivel ez károsodást okozhat vagy megégetheti a bőrt! Egy bőrfelület kezelése után helyezze át a készüléket a következő területre a folytatásához!

## **!** Figyelem!


- Ne engedje, hogy gyermekek egyedül használják ezt a terméket, 16 év alatt csak orvosi felügyelet mellett használhatják!
- Konzultáljon orvosával, mielőtt ezt a készüléket fotoelektromos orvosi esztétikai kezelésre használná!
- Ne használja gyermekek közelében, mivel erős fényt bocsát ki, amely könnyen károsíthatja a fejlődő gyermekek szemét!
- Ne használja elzárt szellőzőnyílás mellett, mivel ez a termék meghibásodásához vagy tűzhez vezethet!
- Ne irányítsa a fényt ruhára, hajra és egyéb tárgyra, mivel az megperzselődést, elszíneződést és károsodást okozhat!
- Rendszeresen ellenőrizze a készüléket, és gyakran tisztítsa meg a fényforrás nyílását a szennyeződésektől, hogy elkerülje a termék meghibásodását és a fényforrás nyílás elzáródását!
- Ne használja háziállatok közelében, hogy elkerülje a sérüléseket!
- Használat után törölje le a készülékre ragadt szőrszálakat, hogy elkerülje a meghibásodást és a bőr károsodását a következő használatkor!
- Használat után a bőr enyhe melegedése és pirulása normális jelenség, használat után egyszerű hidratáló és nedvességpótló kezelést használhat a bőr kellemetlen érzésének enyhítésére!
- A különböző bőrtípusok miatt a kezelés során fájdalom jelentkezhet. Ha a fájdalom erős, hagyja abba a használatot!
- Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket bekapcsolt állapotban!
- Használat után időben kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a tápkábelt, és tegye zárt helyre!

- Ha a gyűrű-tükör hőmérséklet különbsége a környezeti viszonyok megváltozásakor meghaladja a 20 fokot, kapcsolja ki a készüléket, és hagyja állni kb. 2 órán keresztül, mielőtt újra használná!
- Magas páratartalmú időszakokban ajánlott a készülék használatát elhalasztani.
- Ne használja a készüléket gyúlékony és robbanásveszélyes anyagok közelében (pl. dezodor, benzinkút stb.), mivel ez tüzet, áramütést és egyéb veszélyt okozhat!
- Ne tegye ki a készüléket hosszabb ideig napfénynek vagy UV sugárzásnak, hogy elkerülje a súlyos károsodást!
- Ha a beépített ventilátor nem működik a készülék bekapcsolásakor, ne használja, hogy elkerülje a meghibásodást és a használat veszélyét!
- A készülék rendes működésének biztosítása érdekében ne végezzen jogosulatlan szétszerelést, átalakítást vagy karbantartást!
- A készülék környezeti hőmérséklete 0–25 °C között legyen!
- Ne helyezze a fényforrás kimenetét könnyen demagnetizálható tárgyak közelébe, hogy elkerülje a meghibásodást és károsodást!

## **▲ Vigyázat!**

- A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy kezei szárazak! A készülék kizárólag otthoni használatra készült, és nem minősül orvosi eszköznek, nem alkalmas diagnosztikai, kezelési vagy egyéb kereskedelmi célokra.
- A készülék egy precíziós műszer, ezért kezelje óvatosan! A sérülés elkerülése érdekében ne ütögesse, ne ejtse le és ne tegyen rá nehéz tárgyakat!
- Használat után kérjük, tárolja a terméket megfelelően a működőképesség fenntartása érdekében!
- Tartsa be az ajánlott használati időtartamot és gyakoriságot, hogy elkerülje a kellemetlen érzést!
- Ha menstruál vagy szoptat, és szeretné használni a készüléket, akkor előzetesen konzultáljon orvosával!
- Ha használat közben bármilyen kellemetlenséget tapasztal, azonnal hagyja abba a használatot!
- Kerülje a készülék és a tápegység ütődését!
- Használat közben ne nézzen közvetlenül a fényforrásba szabad szemmel!

## Áttekintés

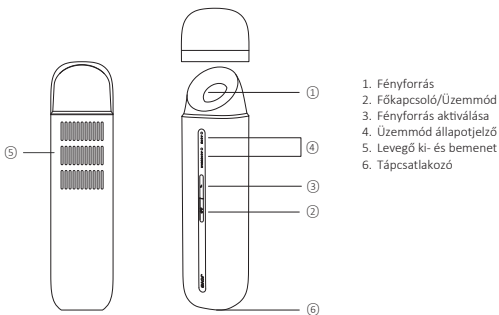

**!** Szigorúan tilos a levegő kimenetet elzárni, mivel a készülék túlhevülés esetén leáll és védelmi állapotba kerül, ami megrongálódáshoz vezethet!

## Műszaki adatok

Megnevezés:	Acneaway fényterápiás akne- és pattanáskezelő készülék
Modell:	JA3
Fényforrás:	3,3 cm <sup>2</sup>
Táp bemenet:	DC 24 V, 1,5 A
Tápegység	
Bemenet:	AC 100-240 V, 50/60 Hz, 1,5 A
Kimenet:	DC 24V, 2,5 A
Szabvány:	FCC CFR 47. fejezet, 15. rész, B alfejezet

## Üzem módok

Az arcbőr érzékeny, ezért először az ACNE üzemmódban használja a készüléket, hogy megszokja a kezelést! Ha a használat során bármilyen kellemetlenséget érez, hagyja abba a használatot! Szükség esetén használat előtt konzultáljon orvosával!

- **ACNE üzemmód:** Gyulladáscsökkentő
- **ACNESCAR üzemmód:** Az aknefoltok halványítása

Megjegyzés: Az utasításoknak megfelelően kerülje el a nem halványítandó bőrfelületet!

## Bőrérzékenységi teszt

- A biztonságos használat érdekében az első használatkor bőrvizsgálatot kell végezni (pl. a kar belső részén)!
- Válassza az ACNE üzemmódot! A készüléket helyezze a bőrfelülethez közel, majd a fényforrás aktiváló gombot egyszer röviden nyomja meg!
- A teszt elvégzéséhez óvatosan csúsztassa a készüléket a bőrön a következő pozícióba!
- Ismétlje meg az eljárást ötször, és ha 1 óra elteltével sem tapasztal rendellenességet, nyugodtan használhatja a készüléket.

## Használat



### 1. lépés

Alaposan tisztítsa meg az arcát!  
(Ha a tisztítás után is feszül és száraz a bőr, használjon hidratálót, és várja meg, amíg a bőr teljesen felszívja!)



### 2. lépés

Csatlakoztassa a tápegységet, tartsa nyomva 2 másodpercig a főkapcsolót a készülék bekapcsolásához! Alapértelmezés szerint az AKNE üzemmód lesz aktív.



### 3. lépés

Helyezze a készüléket a száj közelébe, a kezelendő terület mellé, majd röviden nyomja meg a fényforrás gombot! A kezelés során ügyeljen, hogy a fény ne kerüljön a szemébe! 3 perc inaktivitás után a készülék automatikusan kikapcsol.



### 4. lépés

Pattanások esetén röviden nyomja meg a főkapcsolót a megfelelő üzemmód kiválasztásához!



### 5. lépés

A kezelés után megfelelően hidratálja a bőrt!



### 6. lépés

Használat után 48 órán keresztül gondoskodjon a fizikai napvédelemről!

(Aknéra hajlamos bőr esetén a smink használata nem ajánlott. Szükség esetén csak vékony sminket használjon!)

A készülék napi használatra alkalmas. Ugyanazon a területen naponta legfeljebb 6 alkalommal végezzen kezelést!

## Gyakori problémák és megoldások

Ez a fejezet összefoglalja a termék használata során felmerülő problémákat és javaslatokat ad azok megoldására. Ha az alábbi információk segítségével nem sikerül megoldania a problémát, vegye fel a kapcsolatot az országában működő JOVS ügyfélszolgálattal!

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
Nem lehet bekapcsolni.	A tápegység nincs megfelelően csatlakoztatva.	Ellenőrizze a tápegység csatlakoztatását!
Nem működik a fényforrás.	Lehet, hogy a fej vagy a készülék túlhevült, vagy a fej túl közel van a bőrhöz.	Várja meg, amíg a készülék magától lehűl, és azután használhatja újra! Helyezze a bőr közelébe, és várja meg, amíg az állapotjelző villogni kezd, majd indítsa el a kezelést!
Az üzemmód állapotjelző nem világít.	A készülék nem működik megfelelően.	Ellenőrizze, hogy az áramellátás megfelelő-e! Ha nem, azonnal javíttassa meg vagy küldje vissza a készüléket!

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
Kezelés közben furcsa szag érződik.	A fényforrás kimenet piszkos, és a fekete haj vagy szőrzet nem lett teljesen leborotválva.	Ellenőrizze, hogy a készülék tiszta-e! Adott esetben távolítsa el a fekete haját és szőrszálakat!
Elviselhetetlen fájdalmat érezni kezelés közben.	A kezelendő területről nem távolította el a fekete haját és a szőrszálakat.	Használata előtt távolítsa el a fekete haját és szőrszálakat a kezelendő területről! (Kerülje a szárazon borotválást, mivel az károsíthatja a kutikulát és bőrrallergiát okozhat!)
	A kezelendő terület nem alkalmas a készülék használatára.	Figyelmesen olvassa el a használati utasítás tartalmát, a nem megfelelő személyekre vonatkozó információkat, valamint az utasítások megfelelő használatra és működésre vonatkozó részeit!
	Sérült fényforrás kimenet.	Azonnal javíttassa meg vagy küldje vissza a készüléket!
A kezelt terület megpirul.	Az enyhe bőrpír normális jelenség, nem káros, és gyorsan elmúlik.	Ne használja a készüléket, amíg a tünetek nem szűnnek meg! Kérdés esetén vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatával!
A készülék kezelés közben felmelegszik és nedves lesz.	Ez normális jelenség.	A nyugalom érdekében várjon 1 percet, majd folytassa a kezelést!

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
Nem kielégítő az eredmény.	Nem a megfelelő üzemmódot használja.	Válassza a bőr állapotának megfelelő üzemmódot!
	A csúszó fény intervalluma túl széles, a kezelési terület túl kicsi, vagy a kezelési idő nem elég, hogy hatást gyakoroljon.	Kövesse a használati utasítást, és legyen türelmes, amíg az egész arcot egyenletes mozgással kezeli!
	A készülék használata nem megfelelő.	Válassza a megfelelő üzemmódot!
	Nem megfelelő a napvédelem a kezelés előtt és után.	A napvédelem és az UV sugárzás befolyásolhatja a kezelés hatását.
	Lassú reakció a kezelés hatására.	Hosszabbítsa meg a kezelési időt, illetve a kezelés előtt védje arcát a naptól!
	A kezelés a bőr nedvességével reagál, ami a bőr száraz érzetét kelti, ami normális jelenség.	A kezelés után megfelelően hidratálja a bőrt!

Ha bármilyen rendellenességet észlel, vagy nem tudja megoldani a problémát, időben vegye fel a kapcsolatot a saját nyelvű értékesítés utáni ügyfélszolgálatl! Kérjük, őrizze meg a számlát és a jótállási jegyet a készülék garanciaideje alatt, a jövőbeli felhasználás céljából!



A készülék ártalmatlanításakor ne dobja ki a többi háztartási hulladékkal együtt, hanem vigye el egy kijelölt újrahasznosító központba!

## **Különleges megjegyzés**

A JOVS kizárólagos felelősséget vállal a felhasználói kézikönyv felülvizsgálatáért és magyarázatáért, hogy biztosítsa a tartalmának pontosságát. Az információk tartalmát gondosan ellenőriztük, amennyiben nyomdai hibák vagy kihagyások fordulnak elő, a törvény keretein belül a vállalat fenntartja a végső értelmezés jogát, valamint a javítás és módosítás jogát. A készülék felépítése előzetes értesítés nélkül változhat. A kézikönyvben szereplő képek egy része csak tájékoztató jellegű vázlatos ábra. Ha a kép nem egyezik meg a valósággal, kérjük, a valóságot vegye alapul, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz a verzió megértése érdekében!

## A termékben található veszélyes anyagok vagy elemek nevei és tartalma

### Mérgező vagy veszélyes anyagok és elemek

Alkatrészek	Ólom Pb	Higany Hg	Kadmium Cd	Hat vegyértékű króm Cr(VI)	Polibrómozott bifenil PBB	Polibrómozott bifenil-éter PBDE
Elektronika	X	○	○	○	○	○
Hardver	○	○	○	○	○	○
Műanyag	○	○	○	○	○	○
Csomagolóanyag	○	○	○	○	○	○

Ez az ellenőrzőlista az SJ/T 11364 szabvánnyal összhangban készült.

- Azt jelenti, hogy a veszélyes anyag tartalma az alkatrész összes homogén anyagában a GB/T 26572-2011 szabványban előírt határérték alatt van.
- X Azt jelenti, hogy a veszélyes anyag tartalma az alkatrész legalább egy homogén anyagában meghaladja a GB/T 26572-2011 szabványban előírt határértéket.

A táblázatban feltüntetett „káros anyagok” és a megfelelő alkatrészek a termék rendeltetésszerű használata során semmilyen kárt vagy hatást nem okoznak az emberi szervezetre és a környezetre.

Ezek a fogyasztók és az újrahasznosító szakemberek számára releváns anyagleírást nyújtanak, ami elősegíti a termék megfelelő ártalmatlanítását a kidobás után.



A jelen kézikönyvben leírt normál használati körülmények között a termék környezetvédelmi élettartama 10 év. Ezen környezetvédelmi időszak alatt bizalommal használhatja a készüléket.

Nagyon sajnáljuk, hogy a termék nem nyújtotta Önnek a legjobb élményt. Mindent megteszünk, hogy segítsünk az értékesítés utáni problémák megoldásában.

Adja meg az alábbi információkat, amelyek segítenek munkatársainknak a problémák gyors megoldásában!

Vásárlás helye	<input type="checkbox"/> jovs.com	<input type="checkbox"/> Amazon	<input type="checkbox"/> Más
Vásárlás dátuma			
Fiók/azonosító			
Kapcsolat			
Kívánt szolgáltatás	<input type="checkbox"/> Visszaküldés	<input type="checkbox"/> Csere	<input type="checkbox"/> Javítás
Az ok			
Ellenőr			
Kereskedő bélyegző			
Jótállás	1 év		

## Értékesítés utáni szabályzat

A vásárlás napjától számított 1 éven belül ingyenes csere szolgáltatás vehető igénybe a termék minőségi problémái esetén.

Töltse ki részletesen a jótállási kártya összes rovatát! A nem hivatalos közvetlen értékesítési csatornákon történő vásárlás esetén helyezze el a kereskedő bélyegzőjét, ellenkező esetben a kártya érvénytelen!

Visszaküldés esetén a fő terméket, a tartozékokat és az ajándékokat együtt kell visszaküldeni, és az ellenőrzés után azok nem befolyásolhatják a másodlagos értékesítést.

## Kizárás

Ha nem tudja bemutatni a jótállási kártyát vagy a vásárlási bizonylatot (számla vagy saját készítésű rendelési képernyőkép), nem jogosult az ingyenes értékesítés utáni szolgáltatásra.

Ha a használati idő meghaladja a vásárlás napjától számított 1 évet, és alkatrészek cseréjére van szükség, észszerű javítási díjat számolunk fel.

Emberi tényezők (helytelen kezelés, rendellenes környezetben való használat, pl. páratartalomnak vagy napfénynek való kitétség, külső sérülések) miatt bekövetkezett termékkárosodás esetén nem jogosult ingyenes értékesítés utáni szolgáltatásra.