

JOVS

RevivaEye kollagénes fényterápiás tapasz

Felhasználói kézikönyv

Biztonsági utasítások

A készülék biztonságos használata érdekében figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és a készüléket a rendeltetésének megfelelően használja!



Veszély!

Olyan tartalmat jelöl, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat.



Figyelem!

Olyan tartalmat jelöl, amely súlyos sérülést okozhat.



Vigyázat!

Olyan tartalmat jelöl, amely sérülést vagy anyagi kárt okozhat.



Veszély!

- Azok a felhasználók, akiknek elektronikus implantátumuk van, például pacemaker vagy mesterséges szív-tüdő gép, ne használják a készüléket, mivel balesethez vagy fizikai kellemetlenséghez vezethet!
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében kerülje a készülék használatát vízzel teli berendezések (pl. kád, mosdó) közelében! A készüléket és az áramforrást mindig tartsa szárazon!
- A baleset és a készülék meghibásodásának elkerülése érdekében ne tegye közvetlen hőforrás (pl. fűtőtest, légkondicionáló) közelébe!
- A balesetek elkerülése érdekében ne nézzen közvetlenül a fényforrásba!
- Ha a készülék vagy az akkumulátor sérült, az áramütés elkerülésének érdekében ne használja tovább!
- Baleset elkerülése érdekében tartsa elzárva csecsemő és kisgyermek elől!
- A készülék nem vízálló. Ne merítse vízbe, hogy elkerülje a meghibásodást vagy a baleseteket! Ha vízbe merül, ne használja tovább!



Figyelem!

A megfelelő működés biztosítása érdekében ne szedje szét, ne módosítsa vagy javítsa a terméket saját kezűleg!

A következő csoportok nem használhatják ezt a terméket, mert balesetet vagy bőrpőproblémákat okozhat:

- 18 év alattiak
- Szemgyulladásban, szemsérülésben vagy elváltozásban szenvedők
- Vérnyomászavarban szenvedők
- Mentális egészségügyi problémákkal küzdők
- Terhes nők, érzékeny menstruáció alatt lévők
- Gyógyszert szedő személyek

- Nemrégiben szem- vagy szemkörnyéki műtéten átesett
- Fizikai vagy mentális fogyatékkal élők
- Lázas személyek
- Szívbeteg
- Rosszindulatú daganatos betegek
- Napkárosodott bőrű személyek
- Autoimmun betegségben szenvedők
- Neurológiai betegségekben szenvedők
- Rendellenes sebgyógyulás esetén
- Műszalak miatt pigmentáció vagy kontakt dermatitisz esetén

Rákos megbetegedésben szenvedők, illetve potenciálisan rosszindulatú daganatos megbetegedések esetén használat előtt konzultáljon orvosával! Esztétikai kezelések esetén használat előtt konzultáljon orvosával! Ha bizonytalan a tünetekkel kapcsolatban, használat előtt konzultáljon orvosával!

Kórházi kezelés esetén használat előtt konzultáljon orvosával!

A következő területek a készülék használatára nem alkalmasak, és a használat balesethez vagy bőrproblémához vezethet:

- | | |
|---|---|
| - Sebesült vagy sérült területek | - Kozmetikumok által okozott gyulladt terület |
| - Nem meghatározott területek | - Viszketés, bőrpír vagy fizikai irritáció miatt kialakult foltok |
| - Nagy területű beteg vagy sérült bőr | |
| - Szájnyálkahártya és nemi szervek területe | |

Vigyázat!

- A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy kezei szárazak!
- A készülék kizárólag otthoni használatra készült, és nem orvostechnikai eszköz, nem diagnosztikai, terápiás vagy szolgáltatás célú felhasználásra készült.
- A készülék egy precíziós műszer. Ne ejtse le, ne törje össze, és ne helyezzen rá nehéz tárgyat, hogy elkerülje a károsodást! Használat után tárolja megfelelően!
- Tartsa be az ajánlott használati időtartamot és gyakoriságot, hogy elkerülje a kellemetlen érzést!
- Menstruáció vagy szoptatás alatt használat előtt konzultáljon orvosával!
- Ha használat közben bármilyen kellemetlenséget tapasztal, azonnal hagyja abba a használatot!
- Kerülje a készülék ütődését!

A csomag tartalma

1. napi ápolócsomag

JOVS Diary DEEP MOISTURE TAPASZ x1 ... ①

JOVS Diary BLACK THORN ESSENCE TAPASZ x1 ... ②

JOVS Diary HYDROGEL TAPASZ x1 ... ③

COLLAGEN LIGHT ENERGY KAPSZULA - REVITALIZE EDITION x1 ... ④

2. napi ápolócsomag

JOVS Diary DEEP MOISTURE TAPASZ x1 ... ①

JOVS Diary ESSENCE FREEZE-DRIED TAPASZ x1 ... ⑤

3. napi ápolócsomag

JOVS Diary DEEP MOISTURE TAPASZ x1 ... ①

JOVS Diary BLACK THORN ESSENCE TAPASZ x1 ... ②

JOVS Diary HYDROGEL TAPASZ x1 ... ③


COLLAGEN LIGHT ENERGY KAPSZULA - FORTIFY EDITION x1 ... ⑥

4. napi ápolócsomag

JOVS Diary DEEP MOISTURE TAPASZ x1 ... ①

JOVS Diary ESSENCE FREEZE-DRIED TAPASZ x1 ... ⑤

Áttekintés

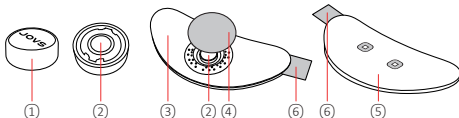

1. Akkumulátormodul
2. Mágnes csatlakozó
3. Béléstasz

4. Átlátszó szigetelőfólia
5. Hátlapvédő papír
6. Eltávolító fül

Használat

1. NAP



1. lépés

Tisztítsa meg az arcát, és törölje szárazra!




2. lépés

Vegye ki a DEEP MOISTURE TAPASZT ①, helyezze a kezelendő szem alatti területre, hagyja hatni 5 percig, majd vegye le és öblítse le a maradék hatóanyagot!




3. lépés

Ha már az arca és a keze száraz, vegye ki a BLACK THORN ESSENCE TAPASZT ②, és óvatosan helyezze a szem alá!

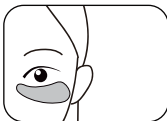


4. lépés

Vegye ki a HYDROGEL TAPASZT ③, helyezze a BLACK THORN ESSENCE TAPASZ ② fölé, és ujjbeggyel óvatosan nyomja rá! Eltávolítás után ne helyezze fel újra!

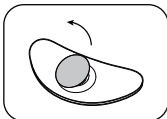


5. lépés

Vegye ki a COLLAGEN LIGHT ENERGY KAPSZULÁT ④, távolítsa el az akkumulátormodult, húzza le az átlátszó szigetelőfóliát a tapaszcól, és helyezze vissza az akkumulátormodult! A tapasz világít.

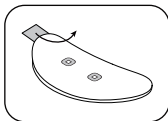

6. lépés

Fogja meg a fület, húzza le a tapasz védőlapját, és helyezze a HYDROGEL TAPASZRA ③! Óvatosan nyomva meg a rögzítéshez! Eltávolítás után ne helyezze fel újra!

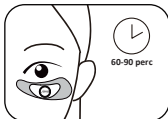

7. lépés

Hagyja fent 60-90 percig, majd távolítsa el az összes felhelyezett anyagot! Húzza le a megmaradt tapaszokat, öblítse le a maradék anyagot vízzel, és folytassa a megszokott bőrápolási rutinját!

2. NAP




1. lépés

Tisztítsa meg az arcát, és törölje szárazra!



2. lépés

Vegye ki az ESSENCE FREEZE-DRIED TAPASZT ⑤, és helyezze a kezelendő szem alatti területre! Ügyeljen arra, hogy szorosan illeszkedjen!

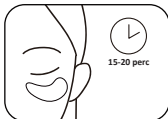

3. lépés

Vegye ki a DEEP MOISTURE TAPASZT ①, helyezze a ESSENCE FREEZE-DRIED TAPASZ ⑤ fölé, és óvatosan nyomja rá! Hagyja hatni 15-20 percig, amíg teljesen felszívódik!



4. lépés


Távolítsa el a DEEP MOISTURE TAPASZT ①, öblítse le a maradék anyagot vízzel, és folytassa a megszokott bőrápolási rutinját!

3. NAP



1. lépés

Tisztítsa meg az arcát, és törölje szárazra!

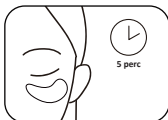


2. lépés

Vegye ki a DEEP MOISTURE TAPASZT ①, helyezze a kezelendő szem alatti területre, hagyja hatni 5 percig, majd vegye le és öblítse le a maradék hatóanyagot!




3. lépés

Ha már az arca és a keze száraz, vegye ki a BLACK THORN ESSENCE TAPASZT ②, és óvatosan helyezze a szem alá!

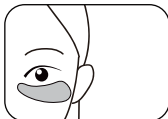


4. lépés

Vegye ki a HYDROGEL TAPASZT ③, helyezze a BLACK THORN ESSENCE TAPASZT ② fölé, és ujjbeggyel óvatosan nyomja rá! Eltávolítás után ne helyezze fel újra!

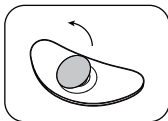

5. lépés

Vegye ki a COLLAGEN LIGHT ENERGY KAPSZULÁT (6), távolítsa el az akkumulátormodult, húzza le az átlátszó szigetelőfóliát a tapaszról, és helyezze vissza az akkumulátormodult! A tapasz világít.

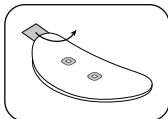

6. lépés

Fogja meg a fület, húzza le a tapasz védőlapját, és helyezze a HYDROGEL TAPASZRA (3)! Óvatosan nyomva meg a rögzítéshez! Eltávolítás után ne helyezze fel újra!



7. lépés

Hagyja fent 60-90 percig, majd távolítsa el az összes felhelyezett anyagot! Húzza le a megmaradt tapaszokat, öblítse le a maradék anyagot vízzel, és folytassa a megszokott bőrápolási rutinját!

4. NAP




1. lépés

Tisztítsa meg az arcát, és törölje szárazra!



2. lépés

Vegye ki az ESSENCE FREEZE-DRIED TAPASZT (5), és helyezze a kezelendő szem alatti területre! Ügyeljen arra, hogy szorosan illeszkedjen!

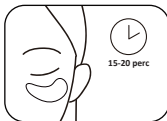

3. lépés

Vegye ki a DEEP MOISTURE TAPASZT ①, helyezze a ESSENCE FREEZE-DRIED TAPASZ ⑤ fölé, és óvatosan nyomja rá! Hagyja hatni 15-20 percig, amíg teljesen felszívódik!



4. lépés

Távolítsa el a DEEP MOISTURE TAPASZAT ①, öblítse le a maradék anyagot vízzel, és folytassa a megszokott bőrápolási rutinját!

Műszaki adatok

Megnevezés:	RevivaEye kollagénes fényterápiás tapasz
Modell:	JF1
Fény hullámhossz	590, 660, 850 nm
Akkumulátor:	40 mAh, 3 V
Szabvány:	FCC CFR 47. fejezet, 15. rész, B alfejezet



A készülék akkumulátort tartalmaz. A készülék ártalmatlanítása előtt el kell távolítani az akkumulátort! Az eltávolítás előtt kapcsolja ki a készüléket! Szerelje le a készülék burkolatát, majd csatlakoztassa le a vezetékeket, és vegye ki az akkumulátort! Az akkumulátort biztonságosan, a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa!

Különleges megjegyzés

A JOVS kizárólagos felelősséget vállal a felhasználói kézikönyv felülvizsgálataért és magyarázataért, hogy biztosítsa a tartalmának pontosságát. Az információk tartalmát gondosan ellenőriztük, amennyiben nyomdai hibák vagy kihagyások fordulnak elő, a törvény keretein belül a vállalat fenntartja a végső értelmezés jogát, valamint a javítás és módosítás jogát. A készülék felépítése előzetes értesítés nélkül változhat. A kézikönyvben szereplő képek egy része csak tájékoztató jellegű vázlatos ábra. Ha a kép nem egyezik meg a valósággal, kérjük, a valóságot vegye alapul!

A termékben található veszélyes anyagok vagy elemek nevei és tartalma

Mérgező vagy veszélyes anyagok és elemek

Alkatrészek	Ólom Pb	Higany Hg	Kadmium Cd	Hat vegyértékű króm Cr(VI)	Polibrómozott bifenil PBB	Polibrómozott bifenil-éter PBDE
Elektronika	X	○	○	○	○	○
Hardver	○	○	○	○	○	○
Műanyag	○	○	○	○	○	○
Csomagolóanyag	○	○	○	○	○	○

Ez az ellenőrzőlista az SJ/T 11364 szabvánnyal összhangban készült.

○ Azt jelenti, hogy a veszélyes anyag tartalma az alkatrész összes homogén anyagában a GB/T 26572-2011 szabványban előírt határérték alatt van.

X Azt jelenti, hogy a veszélyes anyag tartalma az alkatrész legalább egy homogén anyagában meghaladja a GB/T 26572-2011 szabványban előírt határértéket.

A táblázatban feltüntetett „káros anyagok” és a megfelelő alkatrészek a termék rendeltetésszerű használata során semmilyen kárt vagy hatást nem okoznak az emberi szervezetre és a környezetre.

Ezek a fogyasztók és az újrahasznosító szakemberek számára releváns anyagleírást nyújtanak, ami elősegíti a termék megfelelő ártalmatlanítását a kidobás után.



A jelen kézikönyvben leírt normál használati körülmények között a termék környezetvédelmi élettartama 10 év. Ezen környezetvédelmi időszak alatt bizalommal használhatja a készüléket.